

il tuo NUOVO spray freddo Septodont



CryoPulp

Spray de froid
Cold Spray

(FR)

Type d'application :
Le spray de froid convient pour le gel rapide de pellets en résine synthétique, pour le test de vitalité des dents dans le domaine orthodontique et pour le refroidissement de matériaux pour empressement, comme l'hydrocolloïde, etc.

Consignes d'utilisation :
Pulvériser l'objet à refroidir à une distance d'environ 2 à 3 cm pendant 1 à 2 secondes. Ne pas appliquer directement dans la bouche, car de la glace se formerait.

Consignes de sécurité :
H 222 - H 229 Alcool inflammable. Réceptif sous pression ; peut échauffer sous l'effet de la chaleur. Tenir à l'écart des étincelles, des surfaces chaudes, de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas utiliser sur brûler, même après usage. Éviter du rayonnement solaire direct. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50 °C / 122 °F. Ne pas pulvériser sur des flammes nues ou toute autre source d'inflammation. Conserver hors de la portée des enfants.

Menthe
Mint



SEPTODONT
www.septodont.com

PRISMAN GmbH
Otto-Hahn-Str. 5-6
64653 Lorsch, Germany
Tel. +49 (0) 6257 1480

CryoPulp

Cryopulp spray freddo
alla menta




CryoPulp - il nuovo spray freddo di Septodont

CryoPulp è adatto per il congelamento rapido dei pellet di schiuma per il test di vitalità dei denti in odontoiatria e per il raffreddamento di materiali da impronta/fusione, ad esempio idrocolloidi, ecc.

Caratteristiche	Vantaggi	Benefici
Ugello di applicazione	Spruzzatura precisa	Facilità e sicurezza d'uso
Gas butano-propano	Buona potenza di raffreddamento	Efficient
Profumi di menta	Piacevole	Accettazione dei pazienti

Come usare

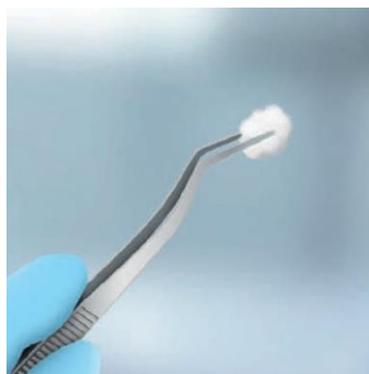

Utilizzare il pellet di cotone



Spruzzare 1-2 sec. dalla distanza 2-3 cm



Il pellet deve essere applicato sulla zona medio-facciale del dente. Anche i denti adiacenti o controlaterali «normali» dovrebbero essere testati

Informazioni sul prodotto

- 200 ml
- Temperatura di uscita $\leq -40^{\circ}\text{C}$
- Dispositivo medico di classe I



Distributore:

Septodont - 58 rue du Pont de Créteil - 94107 Saint-Maur-des-Fossés Cedex - France
Tél. : +33 (0)1 49 76 70 00 - Fax : +33 (0)1 48 85 54 01

Visita il nostro sito web per maggiori informazioni:

www.septodont.it

